

REVYLINE

Infant


RL 025

SONIC ELECTRIC
TOOTHBRUSH

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗВУКОВАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

0-3
years

BABY

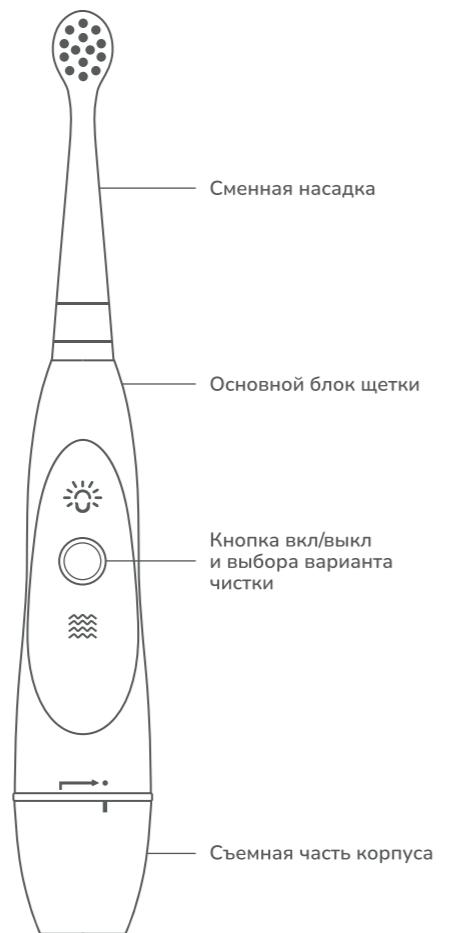

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RL 025 Infant

Предназначена для эффективной чистки зубов.


- Для детей от 0 до 3 лет
- 3 варианта чистки
- Функция «Фонарик»
- Частота колебаний щетинок – 16 000 в мин.
- 2-минутный таймер
- Работает от одной батарейки AAA
- Влагозащита – IPX7
- Материал корпуса – АВС-пластик
- Размер изделия – 26x26x175 мм
- Размер чистящей поверхности – 12x10x0,85 мм
- Диаметр щетины – 0,127 мм
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

www.revyline.ru

Более подробная информация о мерах предосторожности, предупреждениях медицинского характера, зарядке аккумулятора, процессе чистки, уходе за зубной щеткой, гарантийных случаях – на сайте.

СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

Иrrигаторы

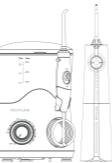

Иrrигатор генерирует пульсирующую водную струю под давлением, которая вымывает зубной налет и микрочастицы пищи из самых труднодоступных мест. При этом происходит массаж десен.

Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки важно обращать внимание на следующее: у щетки должна быть высокая плотность щетины, кончики щетинок должны быть скругленными, а головка – компактной.



Монопучковая щетка используется для точечного очищения зубов, особенно дальних. Она незаменима при уходе за брекетами и другими ортодонтическими конструкциями.

Зубные нити



Нить эффективно очищает пространства между зубами. В ассортименте Revyline – плоские и круглые, вощенные и невощенные нити.

Бальзамы и ополаскиватели

Зубные пасты

Зубная паста – дополнительное средство ухода за полостью рта. К ее выбору нужно подходить индивидуально, учитывая состав, назначение, уровень абразивности и прочее.

Скребки для языка



Скребок удаляет бактериальный налет с поверхности языка, что предотвращает развитие целого ряда стоматологических заболеваний.

Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении межзубных промежутков и боковых поверхностей зубов, незаменим при уходе за несъемными ортодонтическими конструкциями, имплантатами и оголенными шейками зубов.

Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний. Используются как средства для ополаскивания полости рта и для приготовления растворов для процедур ирригации.

REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы развиваем наш бренд и делаем гигиену полости рта эффективной и осознанной, ведь главная наша цель – забота о красоте и здоровье людей.

Вместе с вами мы поддерживаем школы, сады, больницы, детские дома, благотворительные и учебные проекты и главное дарим улыбки тем, кому они необходимы!

Максим Обушенков,
врач-стоматолог,
руководитель компании Revyline
 @freshmax13

Revyline – международная компания, основанная в 2013 году врачом-стоматологом. Товары бренда одобрены стоматологическими институтами.

Продукция Revyline имеет сертификат CE и РУ Минздрава на медизделия.

Revyline сотрудничает с тысячами докторов и клиник. Продукция создается при участии стоматологов и рекомендована экспертами.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном приборе на той площадке, где Вы приобрели его, пришлите ссылку на опубликованный отзыв в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите 200 руб.
на Ваш телефон за отзыв!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:
+7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline
 8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru



Поздравляем!

Вы приобрели детскую звуковую зубную щетку, которая сделает зубы вашего ребенка здоровыми и красивыми. Модель RL 025 Infant – это новый уровень чистоты уже после первого применения.

Чистим зубки
играючи!



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка и замена батарейки

В комплектации щетки – батарейка AAA.

Чтобы установить или заменить батарейку, поворотным движением против часовой стрелки отсоедините от корпуса щетки нижнюю часть блока, вставьте батарейку и поворотным движением по часовой стрелке присоедините нижнюю часть блока к корпусу щетки.

AAA

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

<